

Linde Integrated Valve
Mobiële zuurstoftherapie
in een nieuw perspectief

LIV™

Linde Gas Therapeutics

Linde





LIV™
Linde Integrated Valve

Een nieuwe kijk op veiligheid en gebruiksgemak


Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een mobiele zuurstoftherapie toe te passen. LIV™ is een lichtgewicht, direct te gebruiken mobiele oplossing met een vaste, geïntegreerde drukregelaar. Ingebruikname is eenvoudig en gemakkelijk.

Minder gewicht betekent minder inspanning bij het optillen, dragen en gebruiken van de cilinder. Sluit de zuurstofslang gewoon aan op de slangtule of sluit een apparaat aan op de snelkoppeling (Quick Connector), open de afsluiter en de behandeling kan beginnen.

Bediening van de regelaar is eenvoudig en garandeert een optimale veiligheid voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Er moeten geen regelaars worden gewisseld en er is geen kans op lekkage. De geïntegreerde regelaar zorgt voor een constante lage werkdruk en de vereiste flow voor de behandeling.

Naast een groot flowbereik heeft U de keuze uit 12 flowinstellingen. De flow kan snel en nauwkeurig worden ingesteld om aan de specifieke behoefte van de patiënt te voldoen.

Overal en in elke situatie toepasbaar

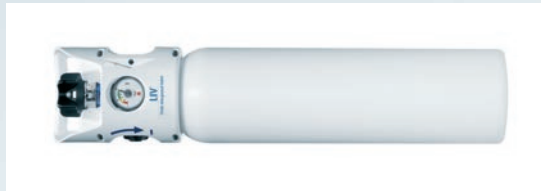

Leveringstabel

De inhoudstabel op de beschermkap geeft een schatting van de gebruiksduur van de cilinder met betrekking tot de weergegeven druk en de geselecteerde flow.

Cilindercapaciteit: 2 – 5 en 10 liter (20 liter in België). Het gehele systeem is anti-magnetisch en MRI-compatibel (≤ 3 T) m.u.v. 20 liter en enkele 10 liter cilinders. Dit wordt op de cilinder aangegeven.




Bereik

Alle LIV™-uitvoeringen hebben een flowbereik tot 25 l/min. en 12 flowinstellingen.

In het venster van de flowregelaar wordt precies weergegeven wat uw flowinstelling is. Om veiligheidsredenen is er zelfs tussen de instellingen geen blokkade zodat de zuurstoftoediening niet kan worden onderbroken.

Duidelijke weergave

De geïntegreerde, actieve drukmeter geeft de cilinderdruk weer bij elke gebruiksmodus, zelfs als de afsluiter dicht staat.

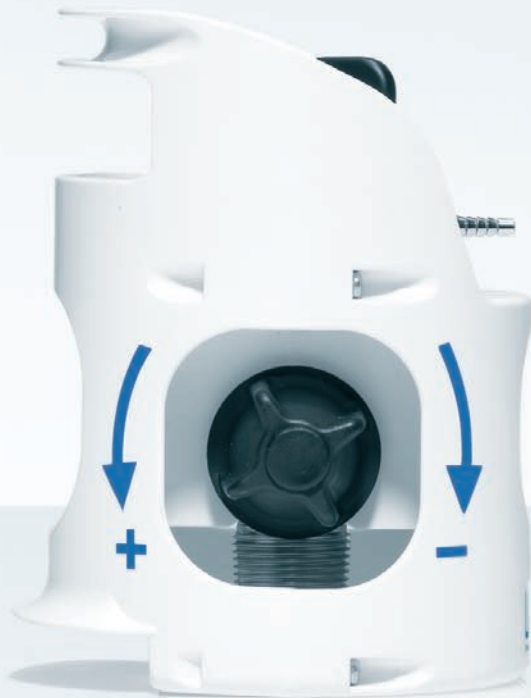

Ergonomisch ontwerp

De LIV™ heeft een geïntegreerde bedhanger die bevestigd is aan een ergonomisch ontworpen beschermkap met 2 gemakkelijke handgrepen. Hierdoor kan de LIV™ snel worden opgepakt en in een simpele beweging aan het bed worden gehangen en in gebruik worden genomen. De gehele regelaar wordt beschermd door een beschermkap.



Snelkoppeling

De LIV™ MaxiFlow is ook voorzien van een snelkoppeling (Quick Connector), verkrijgbaar in alle internationale (DIN/AFNOR) standaarden om een apparaat aan te sluiten zoals u normaal zou doen op het wandafnamepunt.



Meer efficiëntie en minder kosten

LIV™ is ontworpen om zorgverleners efficiënter te laten werken. De regelaar is geïntegreerd, zodat er geen technische handelingen nodig zijn en alle aandacht aan de patiëntenzorg kan worden besteed. De flow kan nauwkeurig worden ingesteld. Het grote flowbereik regelbaar in 12 flowinstellingen, betekent dat aan elke doseringsbehoefte van de patiënt nauwkeurig kan worden voldaan.

Met LIV™ werkt u kostenbesparend, omdat er geen aparte regelaars meer nodig zijn. Onderhoud hoeft niet meer uitgevoerd te worden door de zorginstelling en u bent niet verantwoordelijk voor een defecte regelaar. Bovendien zijn er minder hervullingen nodig waardoor uw voorraadbeheer minder kritisch wordt. Met de goed afleesbare actieve inhoudsmeter weet u onmiddellijk hoeveel zuurstof er nog in de cilinder zit.

Allround service

Onze medewerkers helpen u graag bij uw wensen of vragen, de verwerking van uw opdrachten en de coördinatie van uw diensten.

Linde Gas Therapeutics maakt gebruik van een database om u te helpen met het bijhouden van wat er is geleverd. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen om uw voorraad te beheren, indien dit nodig is.

Bij overschakeling naar LIV™ verzorgen wij een instructie voor uw personeel.

Our strength, your advantage

Linde Gas Therapeutics staat borg voor de levering van hoog gekwalificeerde therapie oplossingen. Onze producten en de daaraan gekoppelde dienstverlening voldoen aan alle internationale vereisten voor medische en farmaceutische apparatuur.

Vandaag de dag zijn wij een gezond, wereldwijd gezondheidszorgbedrijf met gekwalificeerde kennis en totaaloplossingen met betrekking tot medicinale gassen.

Bezoek ook: www.linde-gastherapeutics.nl
www.linde-gastherapeutics.be
www.linde-gastherapeutics.com

Linde Gas Therapeutics Benelux B.V.

De Keten 7
NL-5600 AH Eindhoven
Nederland
Tel. +31 40 282 58 25
Fax. +31 40 281 68 75

Tunnelweg 7
B-2845 Niel
België
Tel. +32 3 880 85 00
Fax. +32 3 844 31 43

